


PRODUÇÃO DE MÁSCARAS COVID-19



SECRETARIA DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

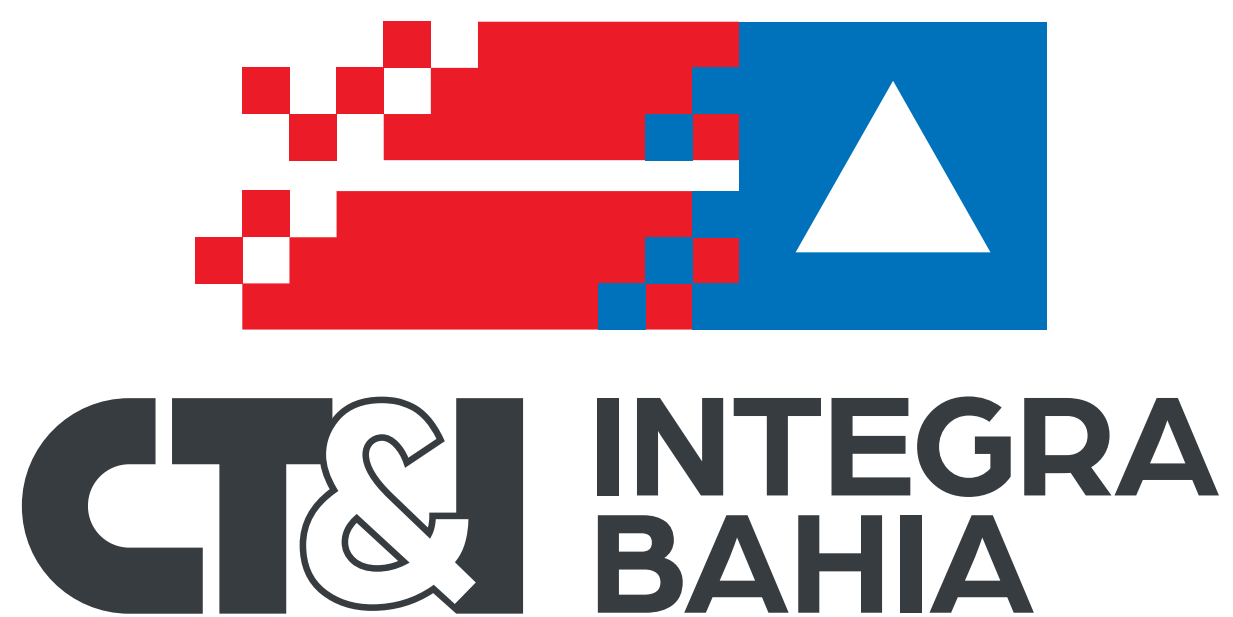

MÁSCARA

BÁSICA

1




TECIDOS LAVÁVEIS:

Tricoline, popeline, algodãozinho,
tecidos 100% algodão.




2

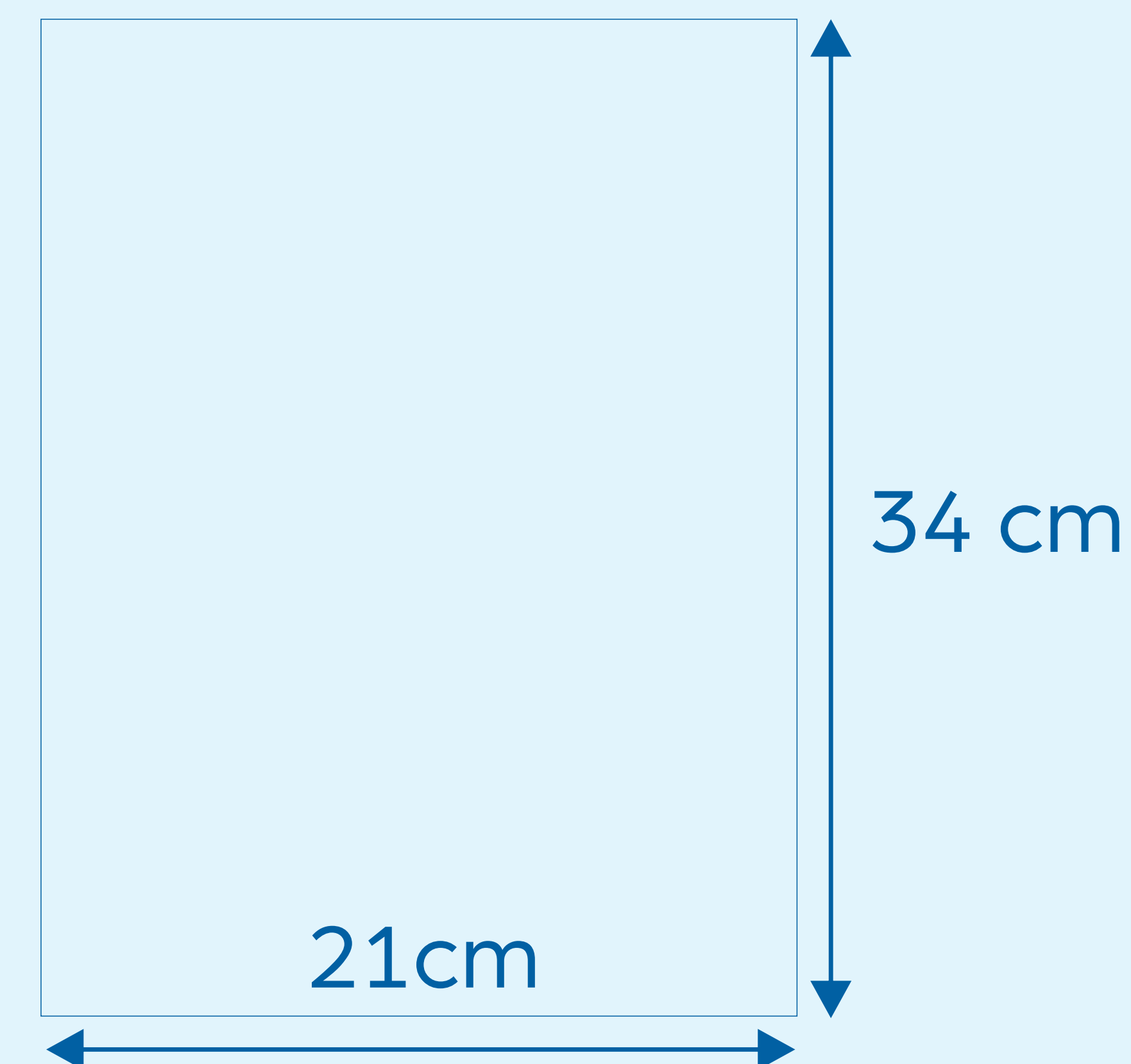



Cortar um retângulo de tecido 100% algodão,
com 34cm de comprimento x 21cm de largura.

3

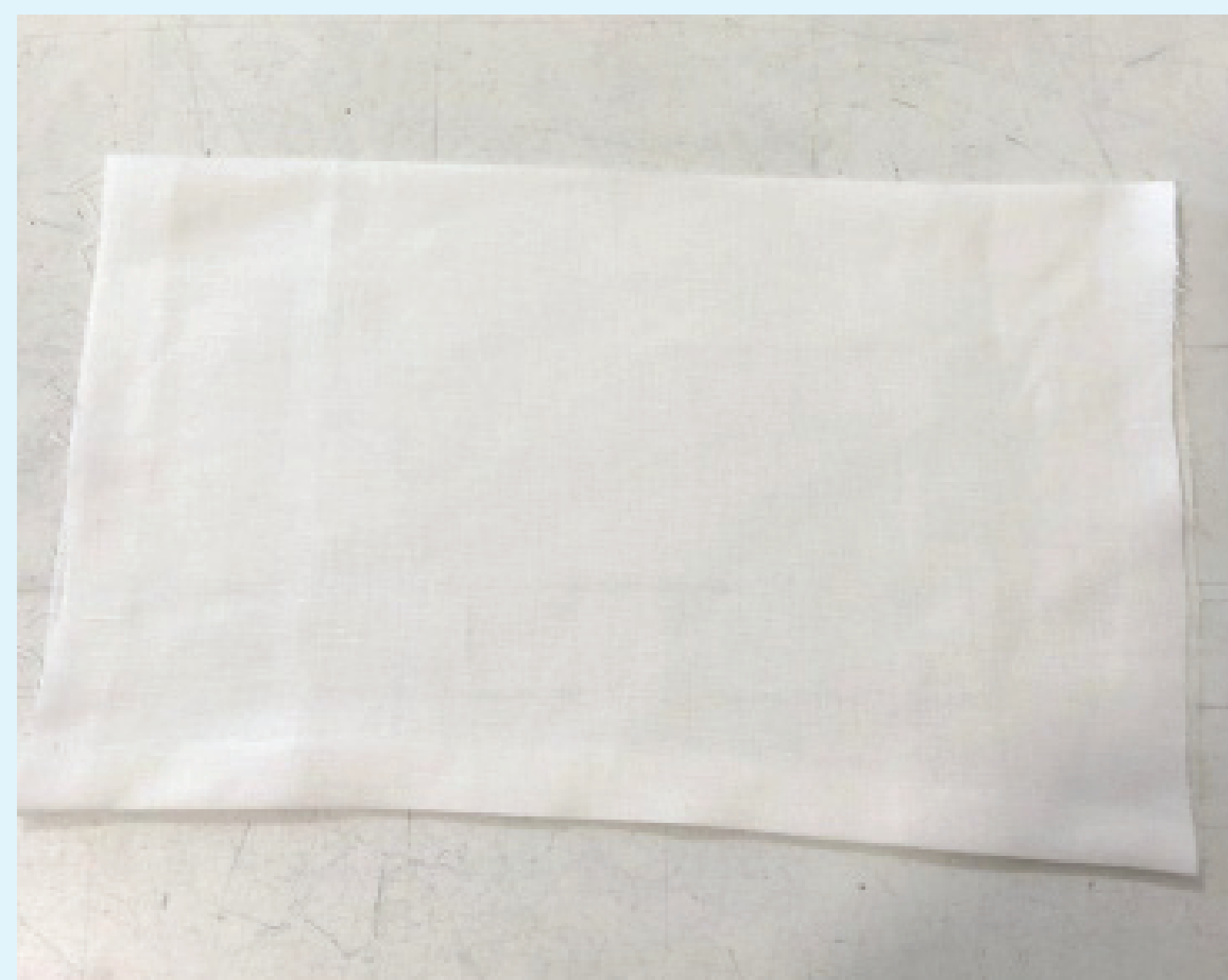


**Dobra ao meio e costura no sentido comprimento.
A parte da costura para baixo.**

4

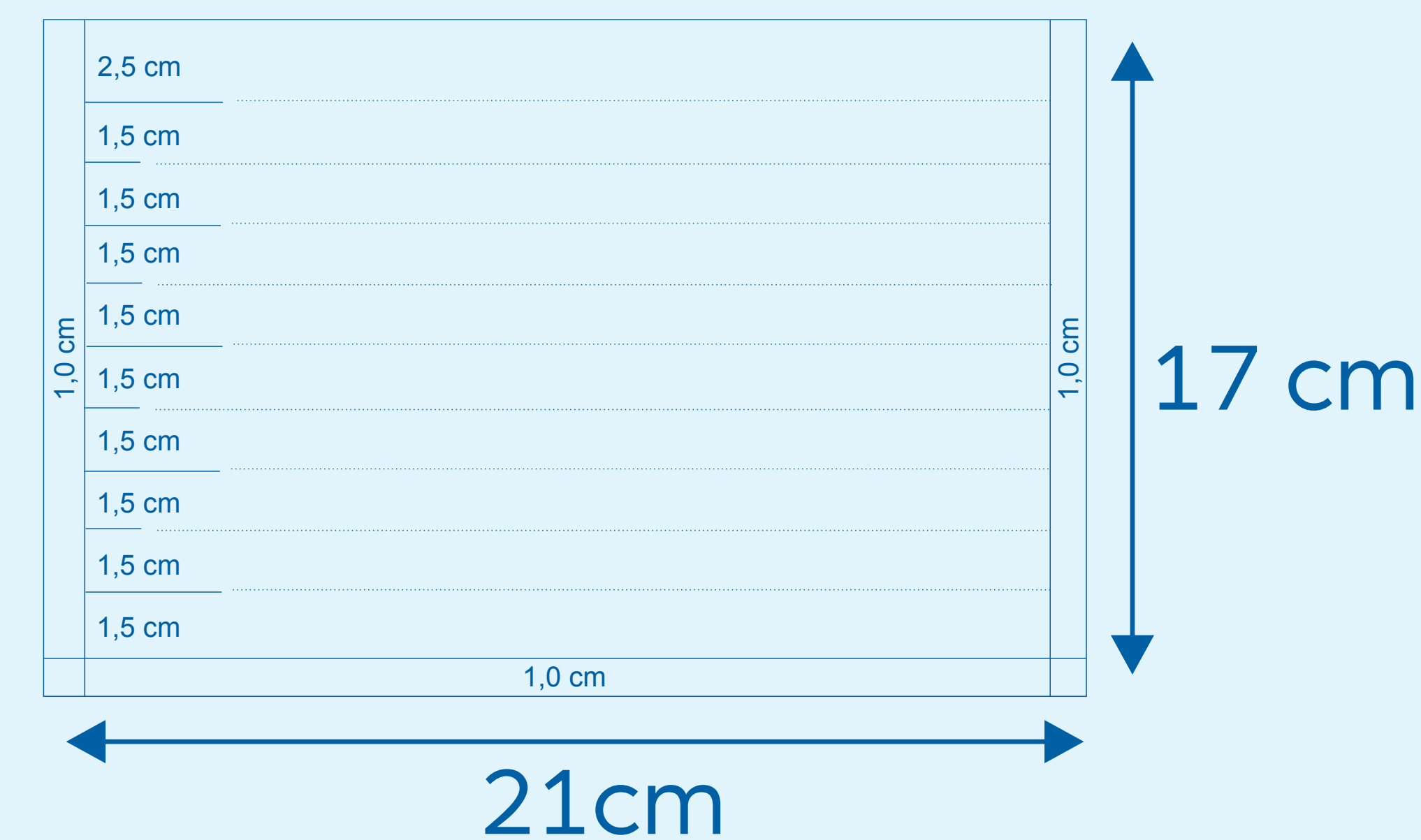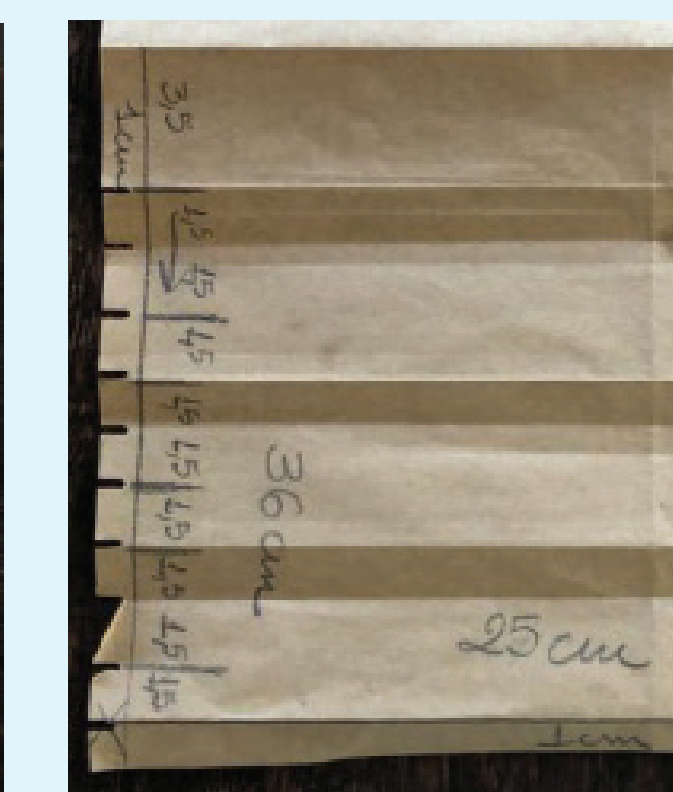

Fazer as marcações nas duas laterais para as pregas ficarem iguais.
Medidas das pregas:
 $2,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,0$ cm.


5

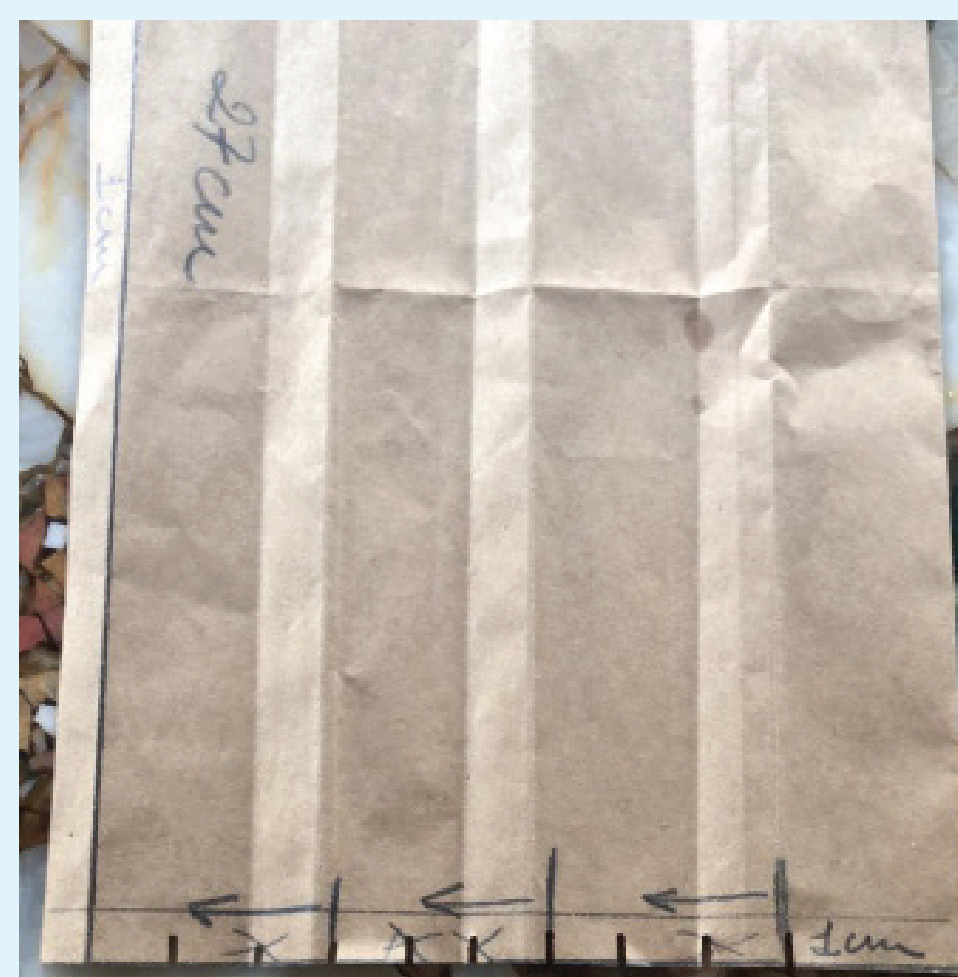

Monte as pregas e bata o ferro.





6

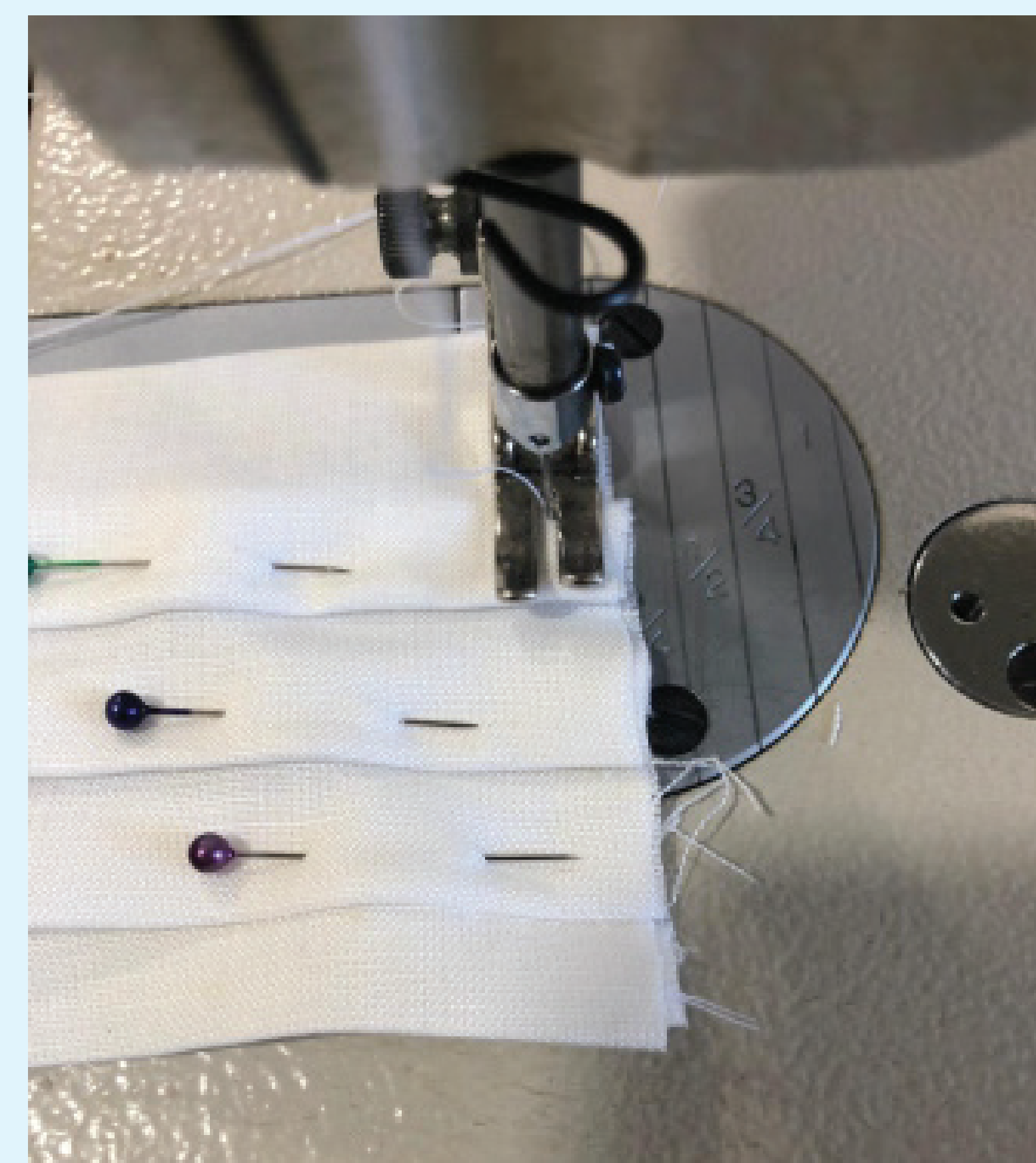

Fazer as dobras das pregas, prender com alfinetes e costurar as extremidades na máquina.

7

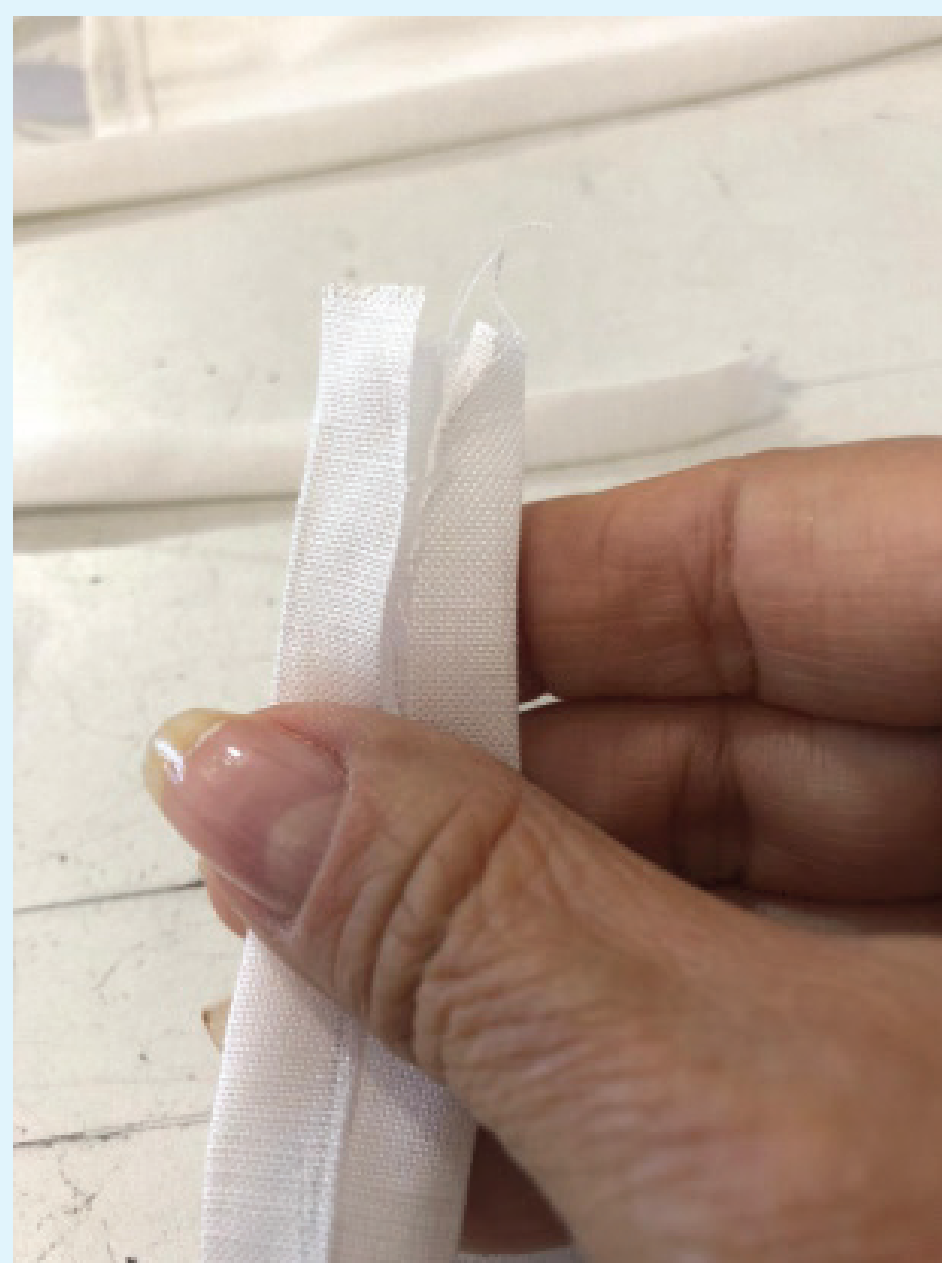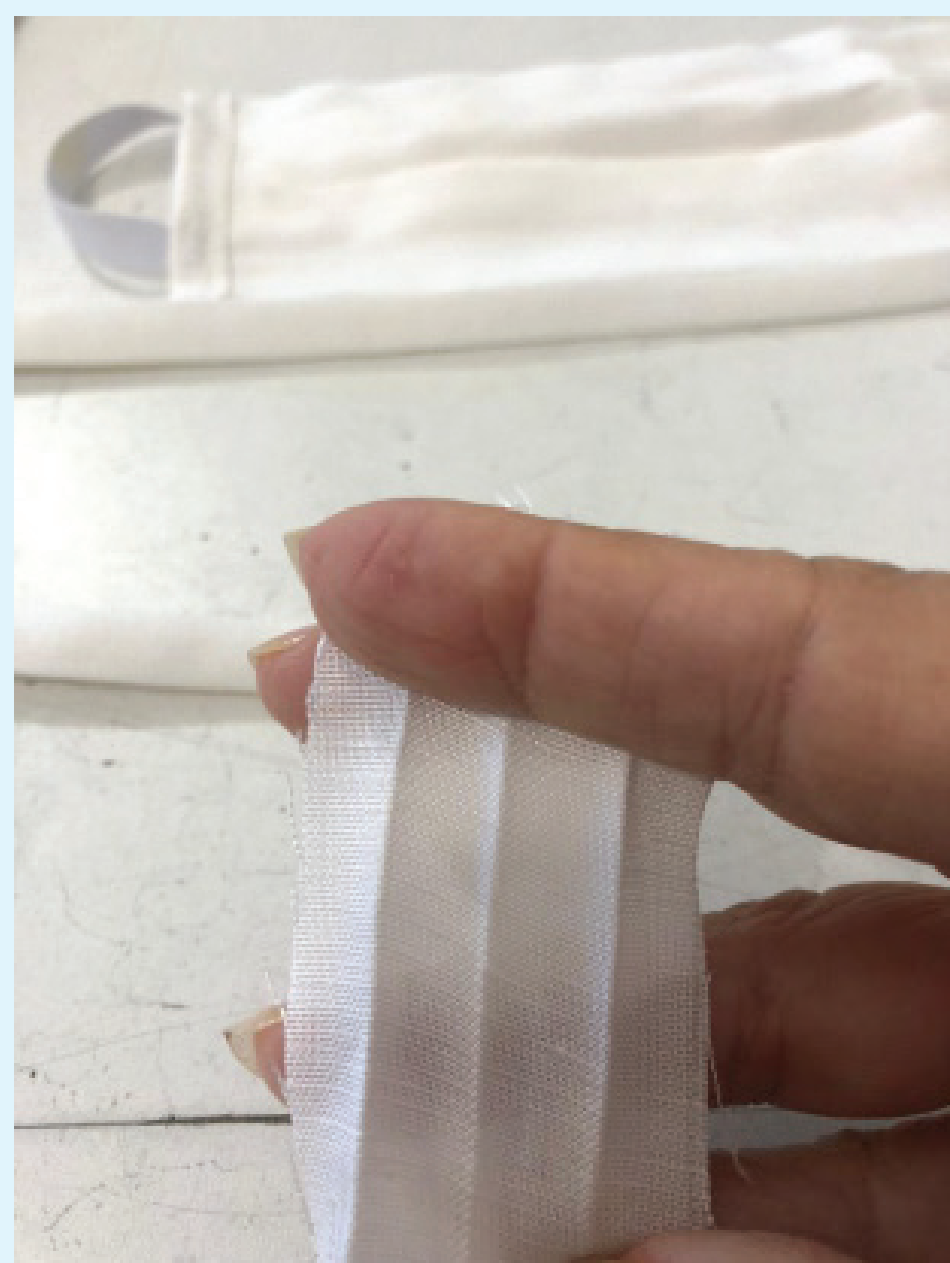

Corta as tiras com 4cm x 10cm, mas fica com 8cm. Os 2cm que sobram devem virar para dentro, dando o acabamento.

8



Prende as alças de elástico com 14cm cada.



PRONTA!



MÁSCARA
REFORÇADA

1





TECIDOS LAVÁVEIS:

Tricoline, popeline, algodãozinho,
tecidos 100% algodão.





2

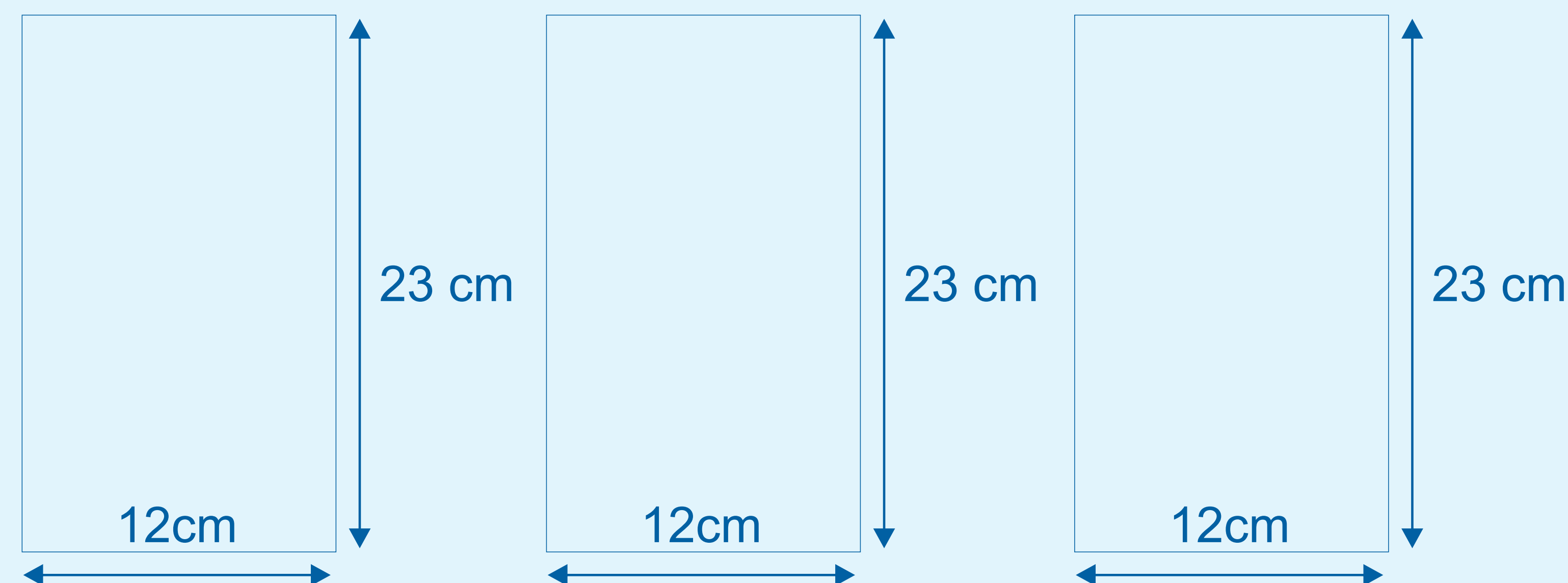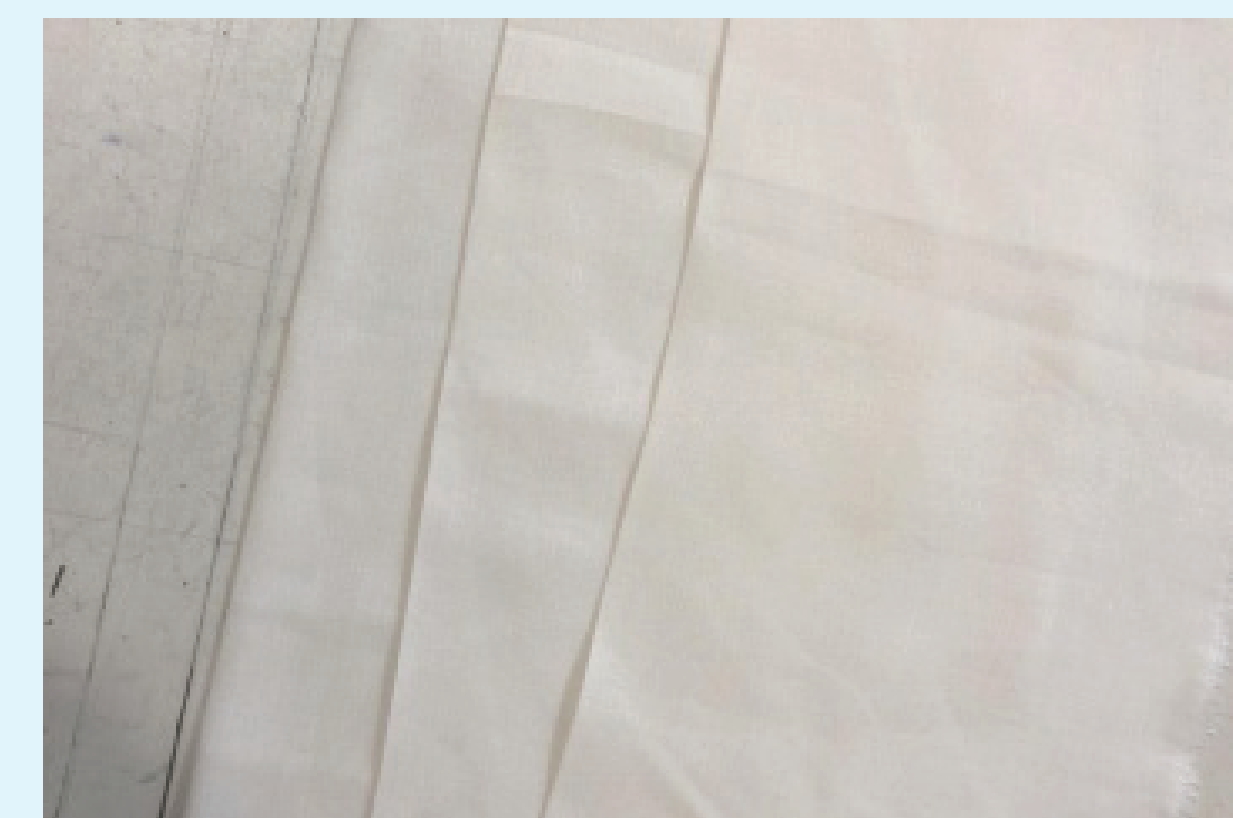

Cortar 3 retângulos de tecido 100% algodão,
com 23cm de comprimento x 12cm de largura.



3

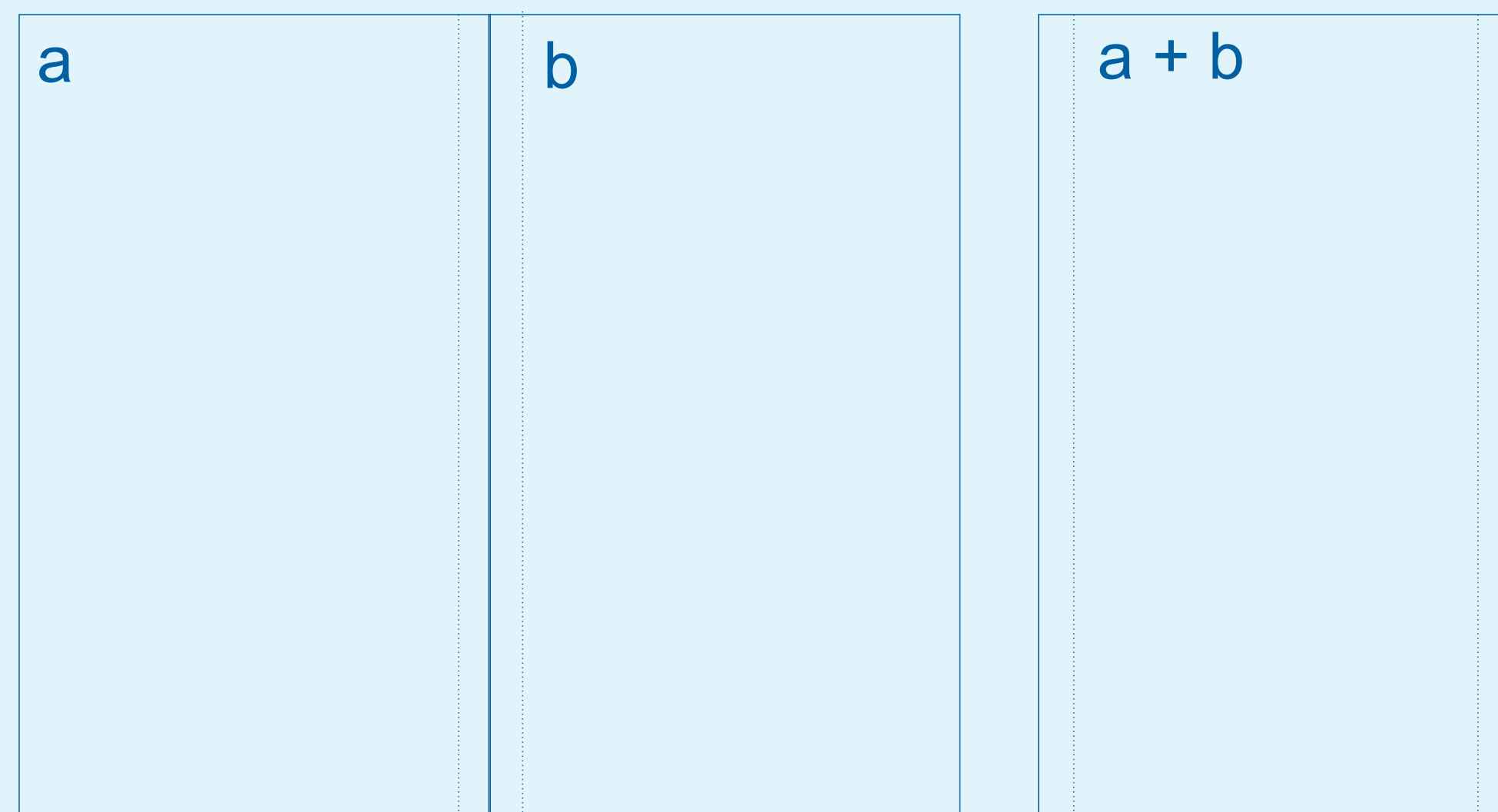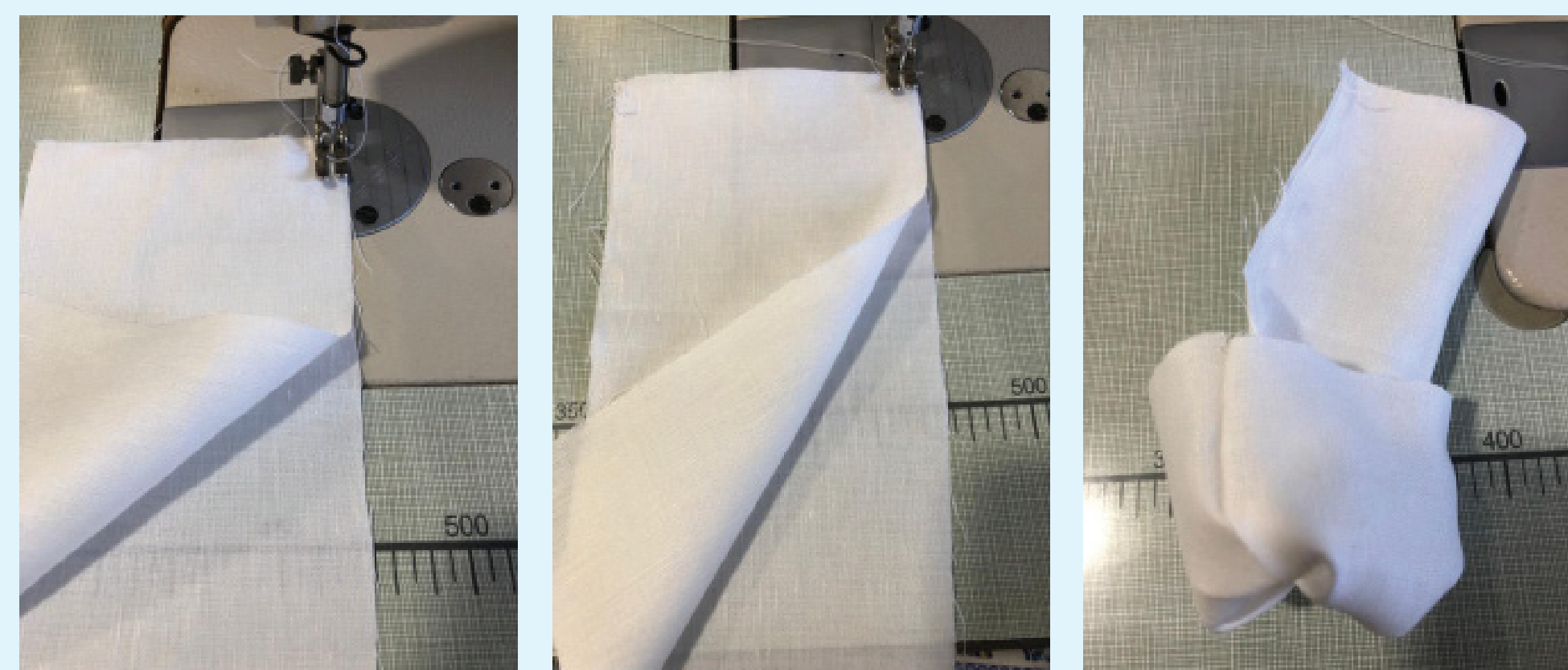

Os dois retângulos costurados, formando um tecido duplo.


Passa uma costura nos dois lados, unindo duas partes. Depois das extremidades costuradas, desvire para o lado direito do tecido.

4

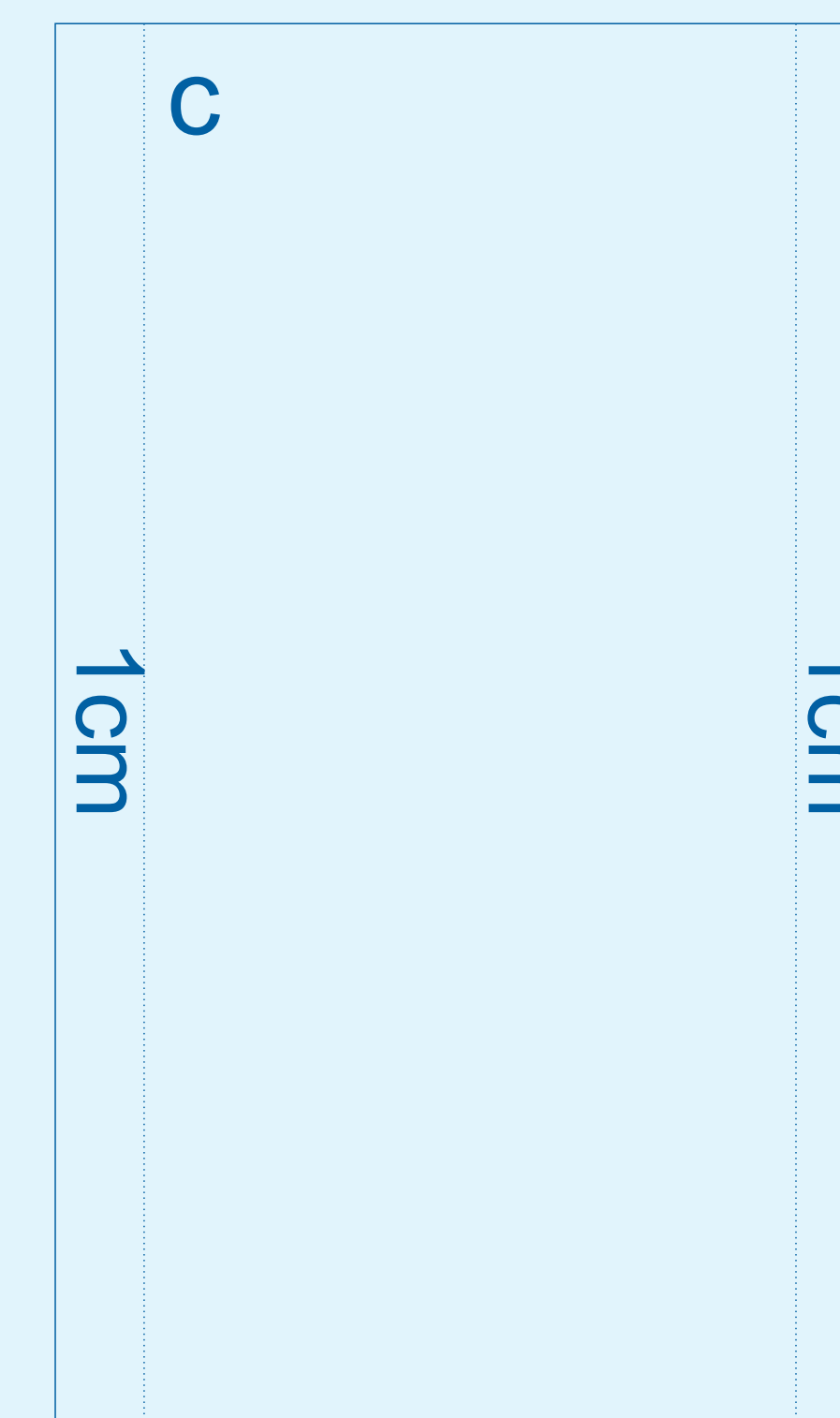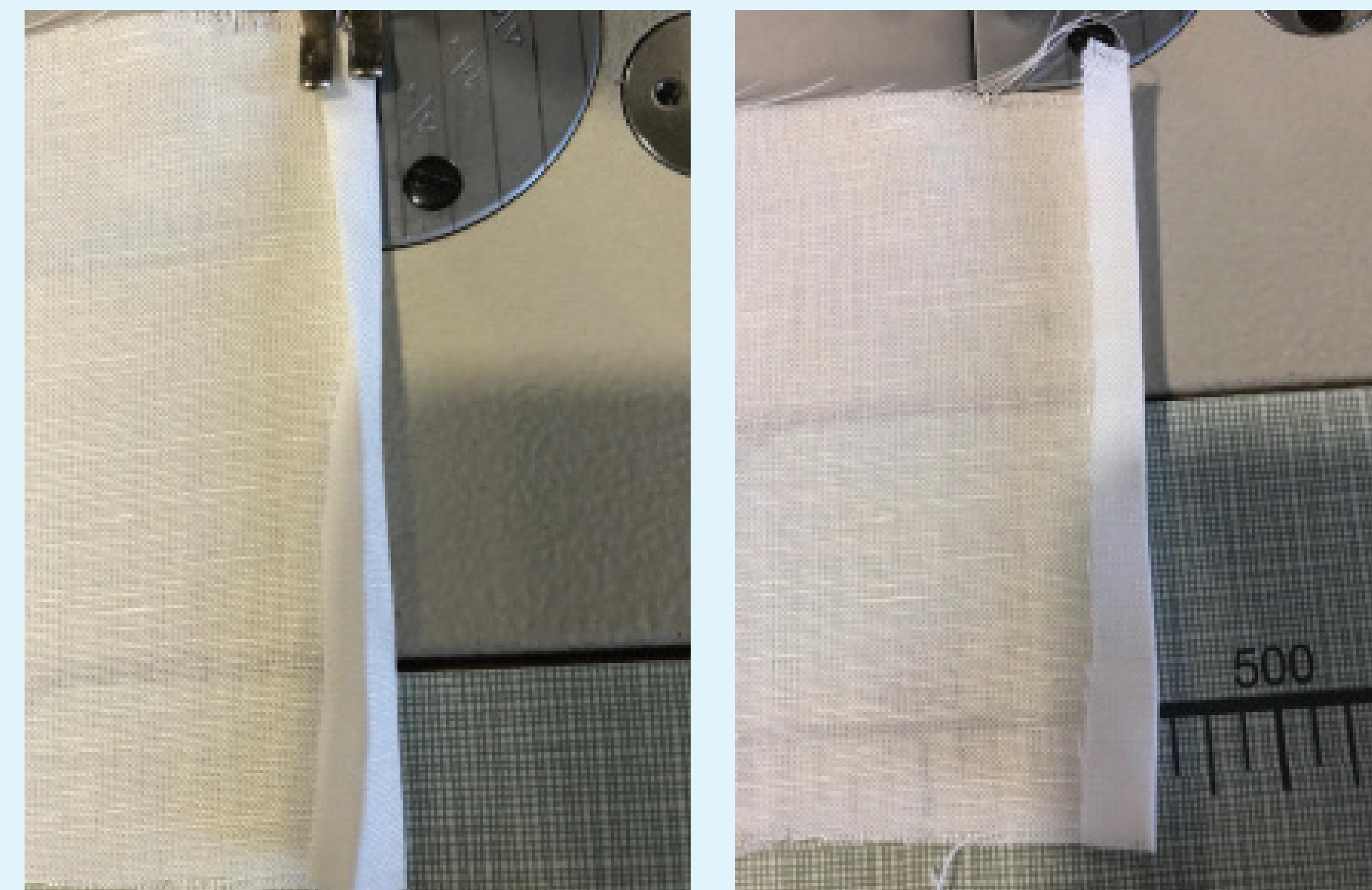

Pegar o terceiro (C) retângulo e fazer uma costura de 1cm em cada lado.

5



Juntar o retângulo duplo (A e B) com o retângulo C. O retângulo C ficará como um bolso.



Prende o porta papel toalha na máscara, fazendo apenas a costura na base.

6




Corta duas tiras com 4cm x 9cm, mas fica com 7cm. Os 2 cm que sobram devem virar para dentro, dando o acabamento.

7

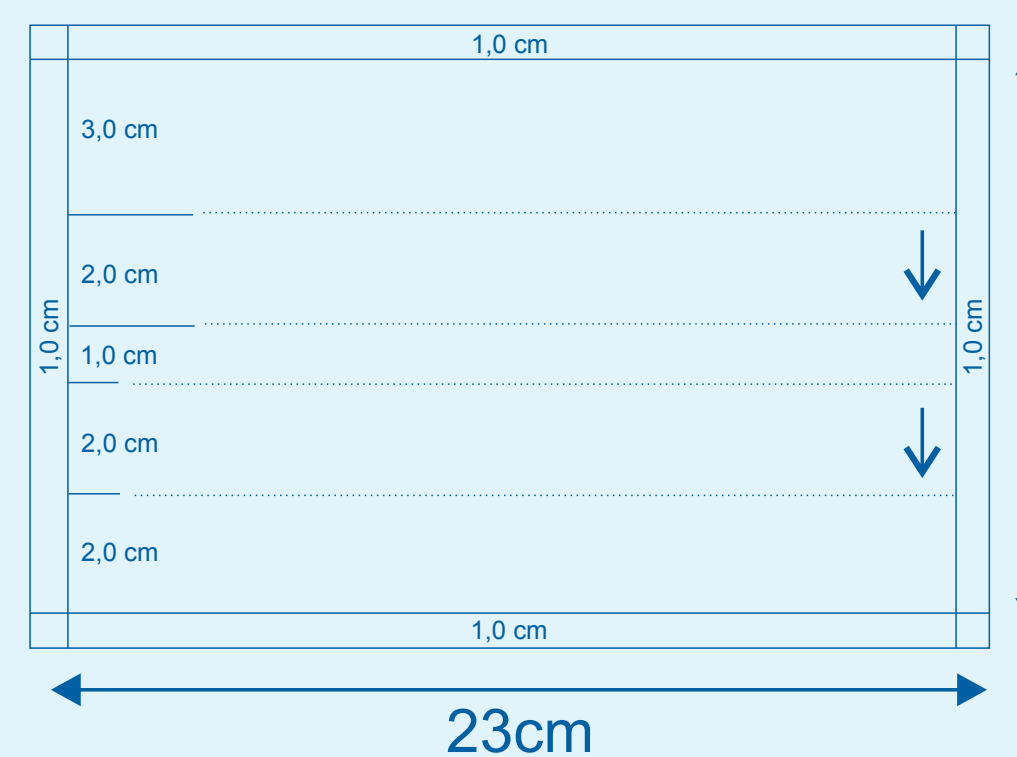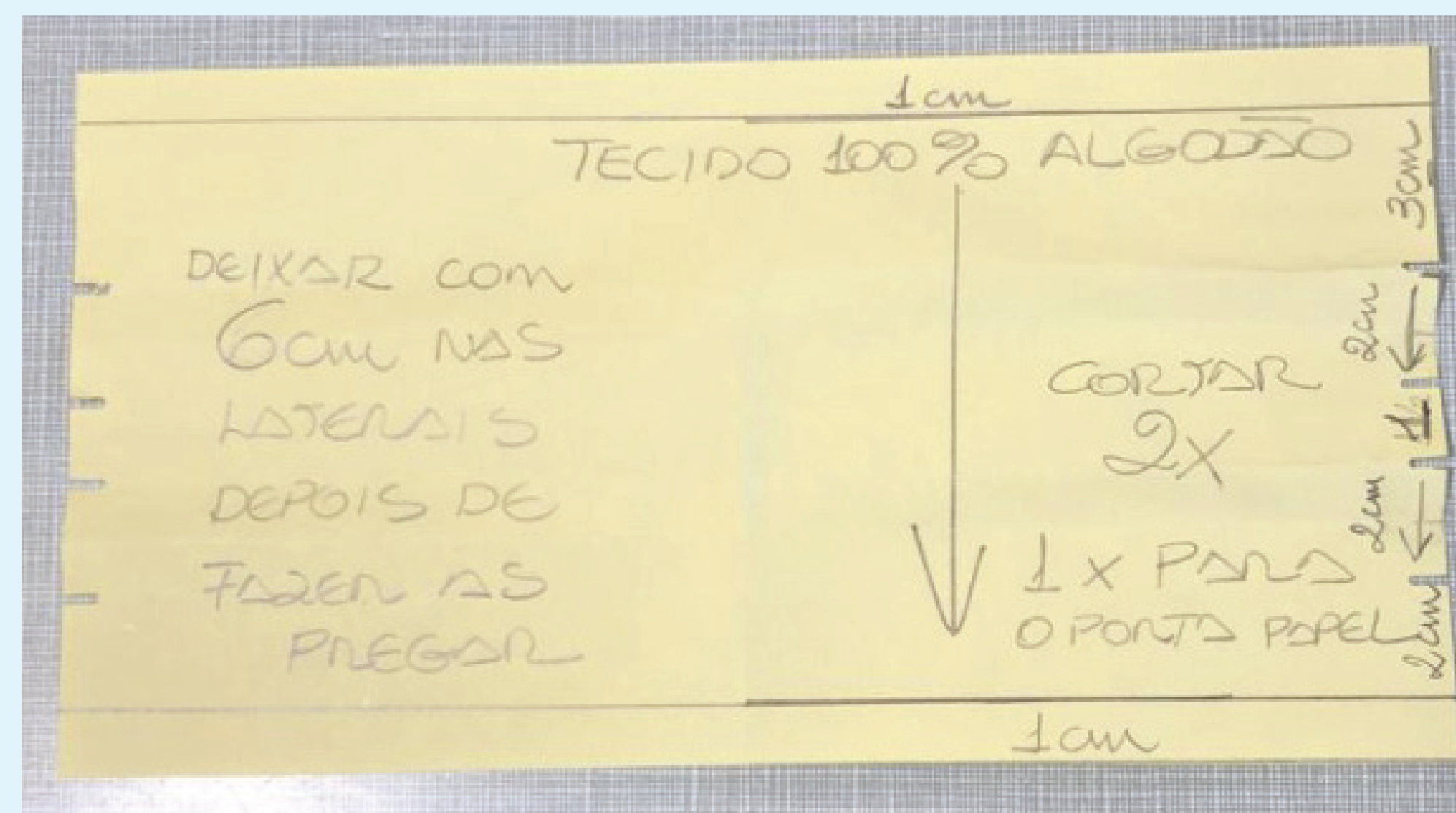

Fazer as marcações nas duas laterais para as pregas ficarem iguais;
Medidas das pregas: 3,0 + 2,0 + 1,0 + 2,0 + 2,0cm;
Costura as duas pregas em ambos os lados.

8

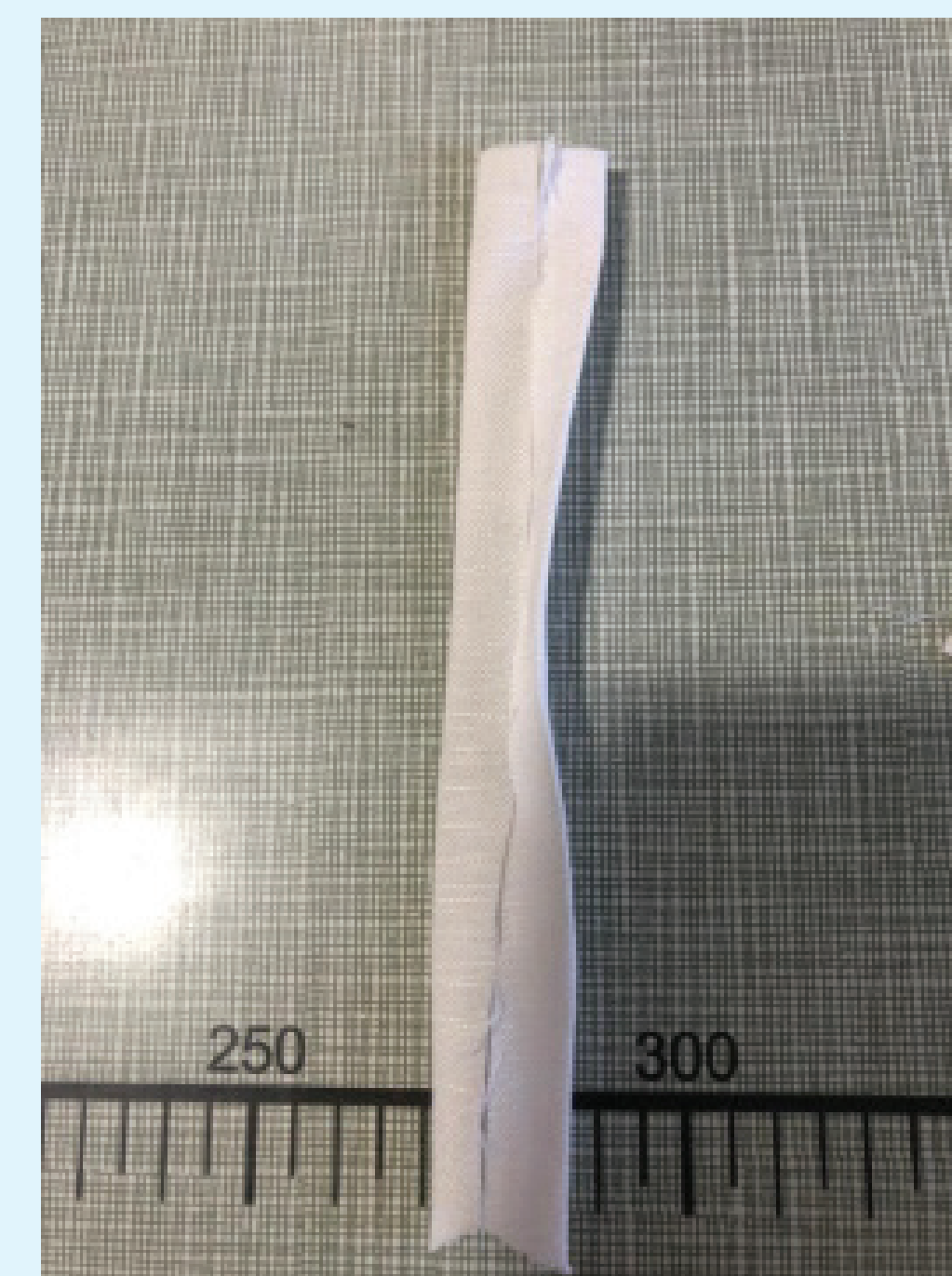

Coloca as tiras ou viés para dar acabamento;
Coloca o elástico junto;
Vira o elástico e faz outra costura para reforçar o elástico.

9



Opções de materiais para o filtro: **Papel toalha** | **TNT** | **Filtro de café**

**Abertura (bolso) para colocar papel filtro.
Cortar o papel filtro em um retângulo de 21cm x 7cm.
Colocar dentro do bolso.**



10



**Visão da parte interna na qual será
introduzido o material descartável.**



PRONTA!

EQUIPE RESPOSÁVEL PELA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Joane Maria de Queiroz Felix

Enfermeira, Mestre em Gestão da Inovação e Gestão por Projetos e Especialista em Administração Hospitalar – Gestora do Sistema de Cuidados da Clínica do Enfermeiro.
www.clinicadoenfermeiro.com.br | [@clinicadoenfermeiro](https://www.instagram.com/clinicadoenfermeiro)

Prof. Kika Lefèvre

Consultora nas áreas de pesquisa de moda, design de superfícies. kika_lefevre@terra.com.br

Prof. Rosinha Levita


Professora do Curso Superior de Design de Moda e empresária – Ateliê de roupas de festas sob medidas.

Contribuições referentes a lavagem da máscara:

Daniele Ramos Rosa da Silva

Enfermeira e 1ª Secretária da Sociedade Brasileira de Hotelaria Hospitalar – Seccional Bahia.

A BAHIA CONTRA O CORONAVÍRUS

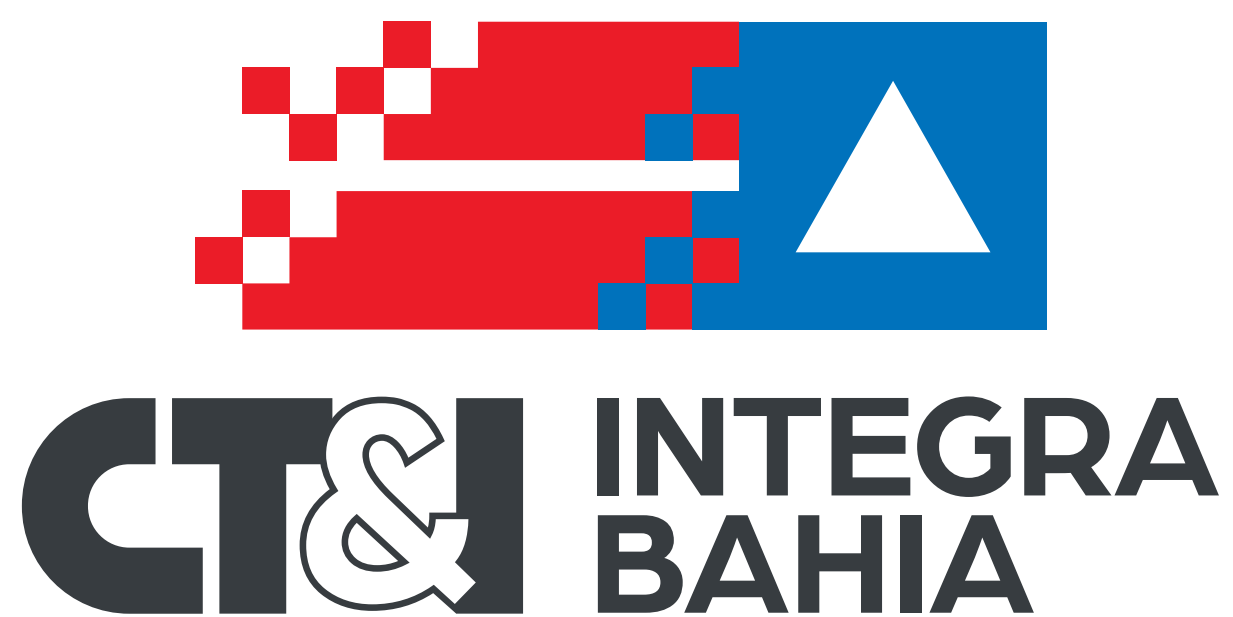

SECRETARIA DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

